

to the Next Generation.

新しいをカタチにする

MASSAGE  
CHAIR  
*Anmaoh* IV



massage chair  
あんま王<sup>IV</sup>

# 新しい発想から生まれました。

STYLE DESIGN INNOVATION

## 近未来的な美しい曲線が 高級感と安心感を演出

今までにない近未来的なフォルムが特徴の「あんま王IV」。美しい曲線が生み出すスタイリングからは、高級感を漂わせつつ、カラダをやさしく包み込むような安心感を与えてくれます。ボディーカラーは、従来のブラックに加え、シリーズ初となるホワイトもご用意しました。



STYLE DESIGN INNOVATION

## プライベート感のあるフルフェイス・フード

パブリックな環境で利用されることの多い業務用マッサージチェア。前作以上のプライベート空間を創り出すために、シリーズ初となるフルフェイス・フードを採用しました。外界からの視線と雑音が大幅に低減されるため、周囲を気にすることなく、マッサージをお楽しみいただけます。



TRADER INNOVATION

## 業界初の スマートフォンによる QRコード決済機能を導入 (オプション)

業界初となるQRコード決済機能をオプションで搭載することができます。また、このオプションを搭載することで、利用状況(コインカウンター・累積稼働時間)の確認や、設定変更(運転時間・金額等)をWEBシステムから遠隔で行うことも可能になります。



## 傷みやすい箇所を 簡単にメンテナンスできるように設計

家庭で使用する場合にはほとんど気にする必要のない布類の擦り切れや汚れ。不特定多数の方が高頻度で利用する業務用だからこそ、消耗しやすい箇所を部品化し、簡単に交換できるように設計しました。必要な部分だけ、小さな単位で交換できるため、維持費用の低減につながります。



TRADER INNOVATION

## 音声アナウンス機能を搭載(ON/OFF可)

音声アナウンス機能をONにすることで、着座時のウェルカムメッセージとマッサージ終了時のサンクスマッセージを搭載した「あんま王IV」が、ご利用者さまを優しくエスコートします。着座してマッサージをしていない場合には、一定間隔で音声が流れることで、居座り防止にもお役立ていただけます。



## コインタイマー(オプション)

今作も専用コインタイマーを採用。前作同様、コインカウンター、累積稼働時間の確認や、設定変更(運転時間・金額等)は、リモコンから行えます。

## 自動復帰機能

マッサージ終了後にリクライニングなどが全て元の状態に戻る自動復帰機能を搭載しています。




## まるで無重力感覚の リクライニング

あんま王シリーズの代名詞とも言える『無重力』はしっかりと継承。人間工学に基づいた、最も身体に負担のかからない姿勢で至高のマッサージをお楽しみいただけます。

### CUSTOMER INNOVATION

## きめ細かなもみ・たたきで、 首すじからお尻下までの 広範囲をマッサージ

もみ玉には、人の手の感覚に近いシリコングムを採用。4つ玉ならではの多彩なもみ・たたき機能は前作を踏襲しつつ、もみ玉の可動範囲を広げました。首すじ・肩や腰はもちろん、今までほぐすことのできなかったお尻下までしっかりとほぐすことができます。

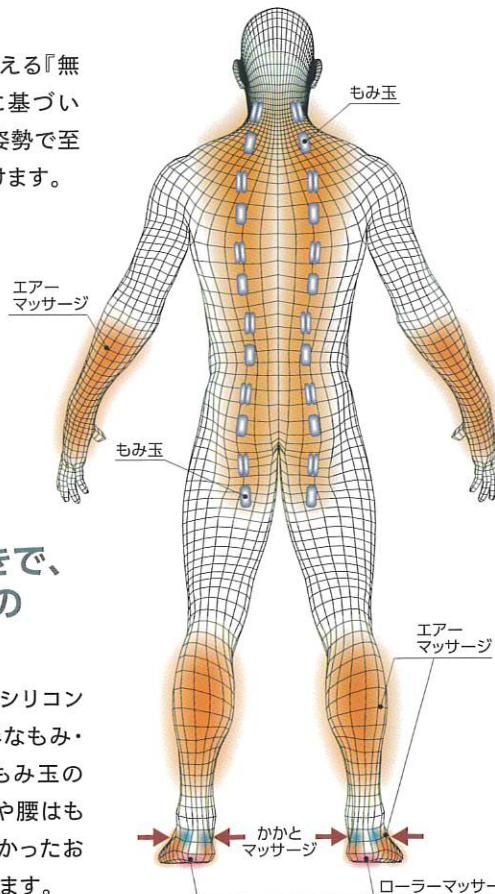

## シンプルな操作性の 多機能液晶リモコン

リモコンは、直観的に操作できるようなデザインを採用。コースは、「おまかせ」「無重力」「ゆりかご」「リラックス」の4つから、お好みに合わせてワンタッチで選択できます。また、カラー液晶画面とシンプルなボタン構成により、強弱変更や肩位置修正も直観的に行うことができます。



### CUSTOMER INNOVATION


## 従来の足裏マッサージに、 最新機能のかかとマッサージ を搭載

新機能のかかとマッサージは、エアーと突起によって、かかとを両サイドからしっかりと指圧されているかのような心地よいマッサージを実現しています。足の両サイドエアーと足裏ローラーにかかとマッサージが加わって、これまで以上の足マッサージ体験ができます。

■かかとマッサージエアーの通常時と圧迫時



■足裏指圧マッサージの突起付きローラー

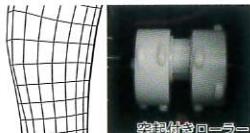

■突起付きローラー  
かかとマッサージ



## 進化は挑戦から。

これまでマッサージチェアの機能はさまざま革新的進化を遂げてきました。

『マッサージチェアメーカーとして、マッサージ機能を進化させていくことは当たり前のこと。加えて、「あんま王IV」では業務用途機能のイノベーションにも挑戦したい』そんな想いから、今回の企画・開発をスタートしました。業務用マッサージチェアの次世代を切り開いていくために、既成概念を取り除くことから始まり、「業務用に求められる要素・機能とは何か」を徹底的に追求しました。その結果、誕生したのが「あんま王IV」です。



# We continue to challenge ourselves.



メーカー希望小売価格  
オープン価格

## 効能・効果 あんま・マッサージの代用

- 疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる
- 筋肉のコリをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩和

## 仕様

- 販売名:マッサージチェア OMC4 ●類別:機械器具 77 バイブレーター ●一般的名称:家庭用電気マッサージ器(JMDNコード34662000)
- 定格電圧:AC100V(ACアダプタ使用)50/60Hz ●本体定格:DC24V ●消費電力:110W ●もみ回数:3~80回/分
- たたき回数:25~800回/分 ●足裏ローラー回転回数:60回以下/分 ●上下移動速度:約0.6~5.0cm/秒 ●タイマー:5~30分(5分単位)
- 本体寸法(約) リクライニングしていない時:幅 810mm×奥行き 1330mm×高さ 1400mm  
リクライニングしている時:幅 810mm×奥行き 1680mm×高さ 1110mm
- リクライニング角度:(背もたれ)約130~170度(オットマン)約10~80度 ●本体重量:95kg ●張地:合成皮革
- 医療機器認証番号:301AGBX00010000 ●JANコード:4560188600110



販売元 株式会社 ケンユー

(本 社) 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町5-19-26 下田ビル  
TEL.0465-32-5010 FAX.0465-32-5011

(東京支店) 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-27-16 NKビル3F  
TEL.03-5363-4045 FAX.03-5363-4046

製造元 株式会社 相生電子 長野県下高井郡木島平村大字往郷 1027



安全に関する  
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の方はご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 医師からマッサージを禁じられている方。(例) 血栓症、重度の動脈りゆう、急性静脈りゆう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
  - 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
  - 悪性しうよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状「けん(倦)怠感、悪寒、血管変動など」の強い時期、衰弱しているとき。) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊髄骨折の方
  - 捻挫、肉離れなどの炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方
  - 背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方
  - 医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

## ご使用にあたって

この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
この商品の保証は日本国内のみ有効です。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味が異なる場合がございます。あらかじめご了承下さい。●本パンフレットの記載内容は、令和元年9月現在のものです。