

さらに
進化して登場!!

チェック
シートの見方

元気度・血管健康度の
測定結果をわかりやすく表示

測り定王2

Heart Rate Variability

これ1台で
体の元気度、
脈波の測定が
できます!!

ここに
注目!!

1. ボディカラーもグリーンでアイキャッチも抜群
2. 測定時間も30秒に短縮!! 高齢者も測定しやすい
3. 測定画面も見やすくなりました。



① = 注意

ココに
注目!

ココに
注目!

あなたの脈波
あなたの脈波を6
の脈波のグラフを
ストで測定結果を
① = 10歳代
② = 20歳代
③ = 30歳代
④ = 40歳代
⑤ = 50歳代

血管健康度
あなたの血管健康度を6段階
とアドバンスであなたの血
管健康度を表示。
= 大変良
B = 良い
C = 普通
E = 少し注
F = 注意
F = 要注意

血管健康度
あなたの血管健康度を6段階
とアドバンスであなたの血
管健康度を表示。
① = 注意


自動測定は測定ですので
目安としてお考えください。
健康管理のために定期的に
測定する事をお勧めします。



あなたの元気度

簡単操作で測定できます。

わずか30秒で測定できるコイン式測定器です。
 「測定王2」は脈波と心拍間変動(HRV)を同時に測定し、
 それぞれの結果を6段階で画面とプリント用紙で出力します。
 現在の身体の状態を「元気度」として表示できる
 コイン式測定マシンです。

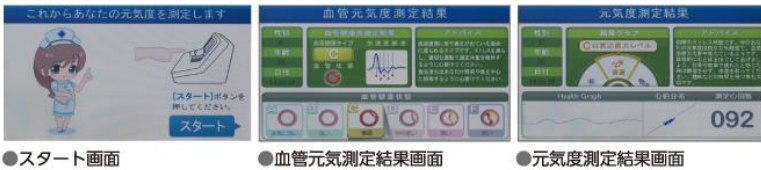

HRV測定とは？

HRVとは心拍間変動(心拍リズム)を測定することで、
 現在の自律神経の状態を把握するための測定です。
 一般的にはストレスの度合いや、免疫活性度などを診ます。

コイン式で収益アップ

- 手の平を置くだけで簡単に測定できます。
- カラー液晶画面と音声ガイダンスで高齢者にも解りやすく解説。
- 操作は、性別と年齢をタッチ画面で入力するだけ。
- 測定結果は解りやすい図解で解説し、プリントアウトしますので、リピート率がアップします。
- 幅30cmのコンパクト設計。わずかなスペースで、どんな施設にも簡単に設置できます。(工事不要)

導入可能施設はいろいろ

- 健康ランド、スーパー銭湯などの温浴施設
- ホテル、旅館などの宿泊施設
- フィットネスクラブなどのスポーツ関連施設
- ショッピングセンターや観光地などの商業施設
- 企業の休憩室

医療機器届出番号/20B2X10004000001 (一般医療機器)

■測定方法	赤外線光反射式	■保管範囲温度	-5℃~50℃ 湿度85%以下
■測定時間	約30秒	■重量	本体 7Kg 専用架台 15Kg
■測定部位	左右人差し指・カラータッチスクリーン対応	■本体サイズ	本体 W340×D400×H235mm
■その他の機能	コイン感知・音声ガイダンス・プリンター 最先端分析アルゴリズム	■専用架台	W330×D375×H820mm
■最大消費電力	40W	■標準小売価格	オープン価格
■使用環境温度	10℃~40℃ 湿度85%以下		

*商品の仕様・カラーは、予告なく変更する場合がございます。



発売元 **Life Spirits** ライフスピリッツ株式会社
 神奈川県藤沢市下土棚 468-1 ベルユーガ湘南 1F
 TEL 0466-45-1171 FAX 0466-45-1173
 HP: <http://www.life-spi.co.jp>

製造元 **株式会社 相生電子**
 長野県下高井郡木島平村大字往郷 988-1

■お問い合わせは

KENYOU
 - Lead the next value -

株式会社ケンユー 健康事業部
 〒250-0002 神奈川県小田原市寿町5-19-26 下田ビル1F
 TEL **0465-32-5010** FAX 0465-32-5011
www.ken-you.co.jp